

株式会社ティ・ユー・エフ お客様サポートセンター

0120-80-1961

受付時間 10:00~11:30 13:00~17:00 (土日祝日 当社指定休業日を除く)

- ●オートショット搭載
- ●操作音ミュート(消音)選択機能

2 P S (ツーピーエス)

取扱説明書/保証書



この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品を安全かつ正確にお使いいただくためには、はじめにこの取扱説明書を良くお読みになり、十分にご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
- 尚、お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

目 次

はじめに・・・・・・1
安全上のご注意
ご使用になる前に 11
各部の名称12~13
ランプカートリッジの交換方法・・・・・・ 14
レベルの設定方法14~15
ご使用前の準備15
ご使用方法16~17
お手入れ方法······18
故障かな?と思ったら19
オートショット・ミュート・製品仕様20~21
製品保証書22~23

安全上のご注意

安全にお使い頂くため、ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。本製品を取扱説明書に記載されている以外の目的で使用しないでください。

本製品は安全性に万全を期して設計されておりますが、ご使用になる前にはこの「安全上のご注意」を良くお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は次のようになっています。

表 示		意 味
<u></u> ♠	危険	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う危険が、 切迫して生じることが想定される内容を示します。
<u></u> ♠	警告	取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性 が想定される内容を示します。
\triangle	注意	取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性および物的 損害の発生が想定される内容を示します。 ※物的損害とは、家屋、家財、及び家畜、ペットにかか わる拡大損害を示します。

●絵表示の例

\bigcirc	禁止図記号	製品の取扱いにおいてその行為を禁止する図記号
\triangle	注意図 記号	製品の取扱いにおいて発火、破裂、高温に対する注 意を喚起するための図記号
0	指示図 記号	製品の取扱いにおいて指示に基づく行為を強制す る図記号



危険 使用上の注意事項

下記のような医用電子機器との併用は、機器に誤作動をまねく恐れがありますので、使用しないでください。



- ・ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- ・人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- ・心電計等の装着型医用電子機器
- ・その他、体内に装着している医用電子機器



警告 使用上の注意事項

電源の取扱いは、次の事項を必ず守ってください。 誤った取扱いにより、感電・ショート・発火することがありますので、たいへん危険です。



電源は、必ず正常なコンセント(AC100V 50Hz60Hz)を使用し差込みプラグは奥までしっかり入れる 発熱・火災・感電・ケガのおそれがあります。



濡れた手で電源プラグ、本製品に触れないでください。 感電・ショートの恐れがあり、たいへん危険です。



損傷・水濡れなど異常がある電源プラグ、コード、及び本体は使用 しないで下さい。感電・ショート・発火のおそれがあります。

※万一、損傷・異常のあるときは、ご購入先や販売元にお申し出ください。



ACコードの上に重い物を乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねた状態で使用しないでください。

感電・ショート・発火の恐れがあり、たいへん危険です。



通電中はタオル・毛布等を本製品にかけないでください。 感電・ショート・発火の恐れがあり、たいへん危険です。



ご使用後は、必ずACコードをコンセントから抜いてください。また、 電源を抜くときには、コードを持たず、必ず先端の電源プラグを持って 引き抜いてください。感電の恐れがあり、たいへん危険です。



ACコードの差込みプラグにホコリが付着している場合はしっかり拭きとる 火災・発火のおそれがあります。



電源コードの抜き差しで、本機の運転や停止を行なわない。 感電・火災・機器の故障の原因になります。



警告 使用上の注意事項

次のような症状の方、箇所(部位)には使用しないでください。 下記の事項を守らない場合、傷害事故に至る可能性があります。

次のような方は本製品を絶対に使用しないでください。

- ・過去に皮膚ガン、または皮膚の悪性腫瘍を患ったことのある方。
- ・脱毛部位に湿疹、乾癬、外傷、開放創、あるいはヘルペスなどの活動性感染症がある方。
- ・糖尿病やその他の全身性疾患、代謝性疾患を患って皮膚状態が 正常でない時。



- てんかんを患っている方。
- ・過去に皮膚がんまたは潜在的な皮膚の悪性腫瘍を患ったことがある方。
- ・4週間以内に強い太陽光を受けられたり、日焼けをされた方 (日焼けマシンなど太陽光以外での日焼けを含む)
- ・光線過敏症を引き起こす可能性のある医薬品、ハーブ、ローション等を6週間以内に使用された方。
- ・施術部位にヘルペス既往歴のある方。
- ・ステロイド剤を常用されている方。
- ・ポルフィリン症、日光過敏症などの光過敏症の方。
- ・過去3ヶ月以内に、放射線治療または化学療法を受けた方。



警告 使用上の注意事項

次のような症状の方、個所(部位)には使用しないでください。



禁止

次の症状をお持ちの方は本製品を絶対使用ないでください。

- 静脈瘤のある方。
- ・38℃以上の有熱性疾患の方。
- ・血圧異常をお持ちの方。
- ・急性疾患、伝染病疾患、結核性疾病の症状をお持ちの方。
- ・悪性腫瘍の症状をお持ちの方。
- ・妊娠中の方や出産直後の方。
- ・心臓に傷害のある方。
- ・ケロイド体質や傷跡になりやすい方。
- ・その他身体に異常のある方。
- ※上記に挙げた疾病以外で現在療養中、治療中の方は医師と相談してください。



次の個所(部位)には本製品を使用しないで下さい。

- ・海水浴などで肌を焼く前の一週間以内及び日焼け後の痛んだ肌。
- ・炎症、傷、やけど、ニキビ、湿疹等皮膚のトラブルのある部位。
- ・ほくろ(緑や青がかったもの)も含めて、あざ、イボや炎症等異常の ある部位。
- 粘膜及び粘膜周辺など敏感な部位。
- ・整形及び刺青をした部位、色素が濃く沈着している部位。
- ・心臓及びその近く。
- ・口ひげ(鼻の下)から下を除く顔面、唇。



警告 使用上の注意事項

下記の事項を守らない場合、傷害事故に至る可能性があります。



次のような方は必ず医師にご相談の上、ご使用下さい

- ・絆創膏にかぶれやすい方、物理的刺激に弱い方。
- アレルギー体質の方。
- ・皮膚疾患のある方。
- ・アトピー性皮膚炎の方。
- ・循環機能、内臓機能の弱い方。
- ・ホルモン異常や病気による毛髪傷害のある方。
- ・肌が弱い方。
- ・角質形成の早い方。・高齢者。
- ・上記に挙げた方以外で体質等に問題のある方。



ご使用前に必ず照射テストを行なって下さい。

ご使用の前に手の甲や腕の内側等の敏感な部位に照射し、10分後に 皮膚の反応を確認してください。照射された部位に火傷を負ったり 水泡が出たりその他の異常を感じた場合は使用しないで下さい。 肌テストは必ずレベル 1 から行い、使用するエネルギーレベルを 上げる前には必ずテストを行ってください。

- ※生理中の方は身体に負担をかけたくないものです。
- 生理が終わってからご使用ください。
- ※飲酒や薬を服用中、疲労の激しいときには、使用しないでください。
- ※上記に該当されない方でも、使用途中で気分が悪くなったり、肌に異常が現れた場合は 直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- また、本製品をお使いになるうえで、ご心配な方も医師にご相談ください。
- ※脱毛の前は油分の多い食品、肉などの食品は控えられることをお勧めします。



警告 使用上の注意事項

本体の取扱いは、次の事項を必ず守ってください。

禁止	本製品を使用する場合は、必ず保護用ゴーグルを着用してください。 ・本製品を自分や周囲にいる人の目に向けて使用しないでください。
禁止	照射部であるランプカートリッジ(プローブ)から出る光や 反射した光を直接見ないで下さい。 ・失明する恐れがあります。
禁止	本製品を使用する前に必ずランプカートリッジを確認してください。ランプカートリッジに茶色もしくは黒色の斑点で汚れが付着している場合や破損している場合は、ランプカートリッジを交換してください。 ・火傷をしたり皮膚を傷める恐れがあります。
禁止	フィルター窓 (照射窓) を強く押さえないで下さい。 ・破損して肌を傷つける恐れがあります。 ランプカートリッジが破損している場合は使用しないで下さい。
禁止	本製品は付属のACコードしか使用出来ません、必ず同梱の付属ACコードを使用して下さい。付属のACコードは本製品専用です、他の機器には使用出来ません。
禁止	美顔カートリッジ(顔への使用)ではオートショットを使用しないで下さい。 ・不意の照射により失明や目を害する恐れがあります。



1 注意 使用上の注意事項

禁止	本製品は高圧部品を内蔵しておりますので、ラジオやテレビ に雑音が入ったり、電子機器を使用した電機製品に影響を与えることがありますので、使用時間をずらしたり別の部屋で 使用してください。
禁止	本製品や電源プラグに水をかけたり、水に浸したりしないでください。また、お風呂やシャワー等の水のかかる場所での使用、保管はおやめください。万一、水や他の液体に濡れたときは、すぐ電源プラグを抜いてください。
禁止	お子様の手の届くところに保管しないでください。 また、おもちゃにもしないください。 事故やトラブルの原因となる恐れがあります。 子供へ使用しないで下さい。
禁止	高温、多湿、ほこりの多い場所、直射日光のあたる場所での使用または放置をしないでください。 不安定な場所に置かないでください。また、落としたり、ぶつけたりしないでください。バランスが崩れて倒れたり、落ちたりしてけがの原因になる恐れがあります。
禁止	本製品は家庭用脱毛器です。業務用や人体の脱毛以外での目的で使用しないでください。 事故やトラブルの原因となります。 ※使用法を熟知していない方は使用しないで下さい。
禁止	本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。故障 のときは、ご購入先または当社までご連絡ください。 発火・異常動作・事故・故障・けがの元になります。



注意 使用上の注意事項

本体の取扱いは、次の事項を必ず守ってください。



異臭・異常発熱したときは使用を中止し、電源プラグを コンセントから抜いてください。 そのまま使用すると破損・発火の恐れがあります。

本製品では次のような症状が生じる場合があります。

- 火傷や水ぶくれが生じる場合があります。
- 使用中、処理した部位に熱さやヒリヒリ感、かゆみ、痛みを感じることがあります。使用直後や24時間以内に処理した部位が赤くなったり腫れたりする場合があり、これらの症状が治まるまでに数日かかることがあります。
- 使用直後に皮膚の色が濃くなる(色素沈着) ことがあります。使用中に痛みや ヒリヒリ感を感じた場合、または処理後、皮膚が赤く熱を持ったような状態になっ た場合は、すぐに冷たいタオルや氷などで処理した部位を冷やしてください。
 - ※必ずご使用の前に肌への照射テストを行なって下さい→7ページ

本製品を使用するにあたり、次のような症状をはじめとする肌トラブルが生じた場合は使用を中止し、すぐに専門の医師にご相談ください。

- 火傷や水ぶくれが生じた場合。
- 使用した部位の赤みが続き、かゆみなどが生じた場合
- 色素沈着が長期間に及んだ場合。

本製品の使用にあたりご不明な点や問題点などがございましたら お客様サポートセンターへご連絡下さい。

商品についてのお問い合わせは

株式会社ティ・ユー・エフ お客様サポートセンター

0120-80-1961

受付時間 10:00~11:30 13:00~17:00 (土日祝日 当社指定休業日を除く)

ご使用になる前に

付属品がすべて揃っているか損傷がないかを確認してください。

標準セット


① 本体:1台

② ランプカートリッジ: 1ケ

③ ACコード: 1本

④ 取扱説明書(保証書1部を含む)

⑤ 保護用ゴーグル: 1ケ

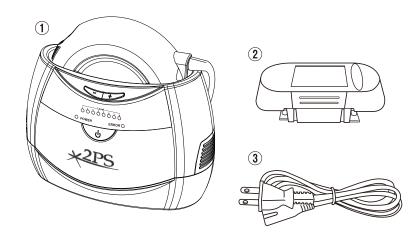







※イラストと現品は形状は異なる場合があります。


各部の名称

本製品をご使用になる前に下記の図と説明をご覧になり、製品を よく理解してください。

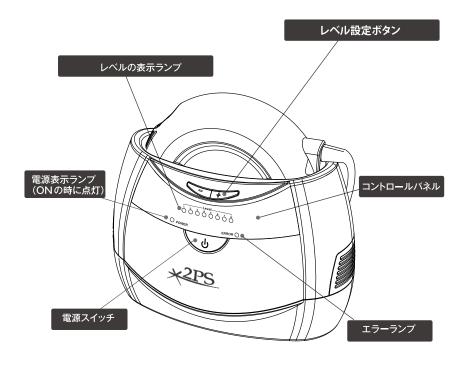

各部の名称

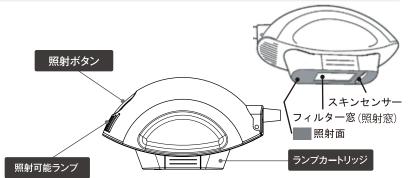

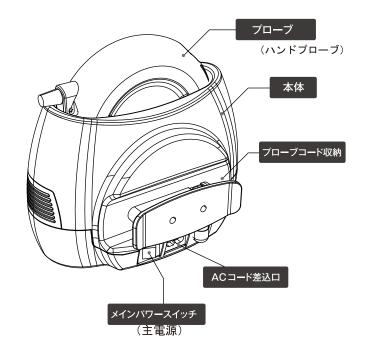


ランプカートリッジの交換方法

●ランプカートリッジに関して

ランプカートリッジ交換方法

ランプカートリッジは消耗品です、ランプカートリッジの照射窓に着色や黒い斑点の付着などがひどくなったり、照射時に大きな音が出たり、照射できなくなった場合はランプの寿命が感えられますので、新しいランプカートリッジに交換してください。

カートリッジ内部のランプ照射回数が増えると黒く汚れてきますので定期的にカートリッジの裏側から覗いて確認して下さい。 黒い汚れがひどくなると性能が低下してきますのでお早めの交換をおすすめします。

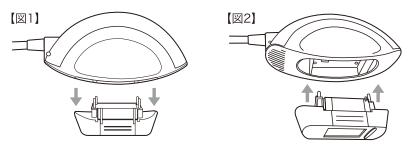

- 1. 本体の電源をOFFにしてください。
- 2. 電源コードがコンセントから抜いてある状態である事を確認してください。
- 3. プローブに装着されているランプカートリッジの両側を手でつかみ左右に軽くゆすってプローブからランプカートリッジをはずします。【図】参照】
- 4. ご使用後のカートリッジはお住まいの地域の規定に従い破棄してください。
- 5. 新しいランプカートリッジを開封してカートリッジの端子とハンドプローブの穴に一致 するように差し込みます。【図2参照】

※ランプカートリッジがプローブにしっかりと装着されていることを確認してからご使用ください。

レベルの設定方法


出カレベル設定

●本製品は8段階のレベル設定が可能です。

レベルが高い程高い効果が得られますが、痛みや肌の赤み、不快感などがある場合にはレベルを下げて使用してください。初めて使う方は「レベル 1」から使用される事をおすすめします。また、最初の作動時には「レベル 1」に自動的にセットされています。レベルは+・・ボタンで設定してください。

■1~5 緑色ランプ

レベル 1~3 太い毛 レベル 4~5 太~普通の毛

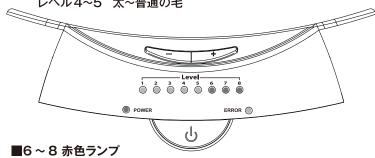

レベル6 細~普通の毛 レベル7~8 細い毛

※出力はレベルの数字が大きいほど上がります、色素が濃いほど光への反応がありますので太い毛ほど低いレベルに反応いたします。実際にご使用するレベルは、その部位によって調整してください。

※赤色レベル(6~8)では、本体が熱を持つ可能性があるので、200回以上の連続照射はおやめください。 本体が熱くなると安全装置が働き一時的に使用できなくなります

ご使用前の準備

- ●使用前に処理する部位の毛をきれいに剃ります。
- ●剃った後に毛が皮膚に残らないようきれいに洗い流してください。
- ●毛を剃る事で使用時の痛みが軽減され、処理をスムーズに行えます。
 - ※使用前には処理する部位にローションや冷却ジェル等を塗らないでください。
- ※パウダーや制汗剤などを処理する部位に塗らないでください。(本製品の故障の原因になります。)
- ※ご使用前に必ず肌への照射テストを行なって下さい→7ページ

進 備

- 1. 箱から本体とプローブを出します。
- 2. プローブのコードを本体の裏面収納部からはずしてください。プローブは本体 プローブ台に正しく収納します。
- 3. ランプカートリッジがプローブにきちんとセットされているか確認してください。
- 4. コードをコンセントに挿します。


ご使用方法

1 本体の裏側の主電源をON(○)にすると本体ファンが回り始めます。プローブを本体プローブ台から持ち上げ、本体電源ボタンを押します。プローブ部分のファンも回り始め、その後エネルギーレベル1が自動的に設定され、レベル8まで選択可能な状態になります (裏面主電源と表面電源と2ヶ所ボタンがあります。)エラー発生時には前面パネルの右側に黄色いエラーランプがつきます。



これからの手順は保護用ゴーグルを装着して行い、照射ボタンを押す前は顔を プローブから遠ざける。ひげに使用する場合はゴーグル隙間からの光を防ぐよ うに、ゴーグルを手で押さえ、まぶたを閉じてからボタンを押すこと。

- 2 レベルを変えるには十・一ボタンで設定を変更してください。
 - ※初めてご使用の方はなるべくはレベル 1 から使用して下さい。慣れてきてレベルを 上げる際にも、肌がヒリヒリしたり痛みを感じる等、不快感がある場合にはレベルを 調整して自分に合ったレベルで使用してください。
 - ※ご使用前に必ず肌への照射テストを行なって下さい→7ページ
- 3 プローブのスキンセンサー部と肌(使用部位)がぴったりと接触するように肌 (使用部位)に対して平行にしてください。プローブの照射面を肌に密着させた 状態で照射ボタンを押してください。

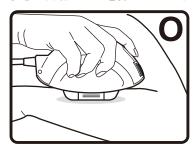



- ※本製品は安全に使用するためにプローブのスキンセンサーと肌が密着している場合に光が照射できる設計になっております。 照射面にあるフィルター窓から発光します。
- ※照射面全体が肌に密着せず、スキンセンサー だけが肌に接触した状態でも照射できる状態 となりますので、ご注意下さい。
- ※照射範囲をわかりやすくするために、カートリッジの両サイドに照射範囲を示す縦線を各2本入れております。【右図】



- 4 プローブ先端部分にある緑ランプが点灯しますと照射充電完了です。スキンセンサー部分を軽く肌に当て使用部位を確認しましたら照射ボタンを押してください。ランプが照射されます。
- 5 照射後は、プローブを肌から20cm以上離してください。肌からプローブを離すとカートリッジが冷却されて火傷等のリスクから肌を守ります。
- 6 照射が終了すると約3~6秒後に次の照射が可能になります。次の照射はカートリッジの縦線を目安にし移動します、プローブを横方向(縦線がある側)にずらす場合は照射面の白いプラスチック部分が発光しないので1/4重なるようにすると照射される箇所が並びます。
 - 【重要】本製品は使用中にランプを冷却するために内蔵ファンが作動します本体 及びプローブのファンの音がしない(回転してない)場合は使用しないで すぐにサポートセンターへご連絡下さい。
- 7 以上の手順を繰り返して処理を続けてください。本製品には安全機能しとしてマ グネットセンサーを利用した「プローブファンストップ機能」が搭載されています。 プローブを本体プローブ台に収納すると、マグネットセンサーにより自動的に電 源とプローブファンが停止します。
- **8** 使用が終了しましたら、プローブを本体プローブ台にセットします。本体電源と プローブファンがOFFになっていることを確認し、本体裏面の主電源スイッチ を切ります。プローブのワイヤーを本体裏面に収納し、電源コードをコンセント から抜いてください。

※注意

- ●使用中、程度に関わらず傷みを感じた場合にはレベルを調整して使用してください。
- ●処理範囲にほくろ等色素が濃い部分が入ってしまう場合は、必ず白色~肌色の絆創膏などでその部位に光が当たらないようマスキングして下さい。
- ●処理後は肌へダメージを残さない為に保冷剤や水などを直接肌に当てず、タオルや布で包み20分以上冷却を行ってください。

■使用間隔について

効果的に使用するため同一部位への使用は2週間間隔で3~5回、5回目以降 は4週間間隔での使用をおすすめします。

※ご使用の際は必ず使用日、使用部位とレベルの記録を残して、次回使用の際の確認にご利用下さい。

お手入れ方法

準備

本体の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてあることを確認してからお手入れをしてください。使用後は清潔で乾いたやわらかい布などで、軽くほこりや汚れを取り除くようにしてください。

プローブ

使用終了後に、必ず照射部分は掃除を行うようにしてください。

水で薄めた中性洗剤を乾いたやわらかい布に含ませ、照射面に付属した毛などの汚れをキレイに取り除いてください。

その後は、清潔で乾いたやわらかい布で軽くふき取り、完全に乾かしてから保管してください。

※汚れがひどいときは、市販の消毒用アルコールをお使いください。



警告



本体、プローブ、ランプカートリッジ等を水洗いしないでください。 感電やショート、故障の恐れがあります。



注意



お手入れの際に、シンナーやベンジン類を使用されますと変形・ 変色の原因になりますので使用しないでください。

故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思われましたら、まず次の項目をご確認ください。

Q:【電源が入らない】

A:電源コードが本体に正しく差し込まれているかどうか、そのコードがコンセントに正しく差し込まれているかどうかの2点をご確認ください。

Q:【照射ボタンを押しても光が照射されません】

A:本体の照射可能ランプ(緑色)が点灯しているかどうかご確認ください。

A:エラーランプを確認してください。エラーランプが点灯していましたら、本体の電源を入れなおしてください。

A: 照射部が皮膚に十分接触しているかどうかを確認してください。その後、処理する部位に対して平行にプローブが皮膚に押しあてられるようにして、照射ボタンを強めに押してみてください。

A:10秒間照射可能ランプが点灯していない場合は、一度本体の電源をOFF にして再度電源を入れ直してください。

一度に長時間使用した場合、本体が熱くなり照射が出来なくなる場合があります。この場合は本体の電源をOFFにして30分ほど置いて機器を冷却させてください。

- ※使用時間に関しては使用レベルや使用環境(室内温度等)により異なります。
- ※レベル6・7・8での連続照射時に起こる可能性が高いです。

これらの項目を見直してもトラブルが解決しない場合や、上記以外の異常やご使用するにあたりご不明な点や問題点などがございましたら、カスタマーサービスにご連絡ください。

販売元 株式会社ティ・ユー・エフ お客様サポートセンター **0120-80-1961**

受付時間 10:00~11:30 13:00~17:00 (+日祝日 当社指定休業日を除く)

オートショット説明

, オートショットとは

オートショットはレベル1~5で、プローブのスキンセンサーが肌に接触すると自動に照射を行う機能です。ボタン操作をしないで照射できますので広い範囲を連続して照射する場合はプローブの位置をずらして、照射面(センサー)を肌につけて待つだけで次の照射をします。ボタンを押すのが大変な部位に使用するときも便利です。

(オートショット使用方法)

- 1、プローブが本体に載った状態で、本体裏側の主電源スイッチが OFF になっている事を 確認します。
- 2、レベル設定ボタンを+-両方押したまま、本体裏側の主電源スイッチを ON にします。
- 3、プローブを手に持ち、本体表の ON/OFF スイッチを押すとレベル表示ランプが点灯して オートショットが有効で起動します。オートショット使用時はチャージ完了音のミュート機能(消音)は使用できません。
- 4、レベルは $1 \sim 5$ まで使用できます、プローブを本体に戻すと一時停止します。再開は 3 の手順で行ないます。
- 5、オートショットを無効にするときは、プローブを本体に戻して一時停止させた後に、本 体裏側の主電源を OFF にして下さい。
- 6、使用後は必ず本体裏側の主電源を OFF にして下さい。主電源を OFF にするとオートショットは無効になります。



/!\ 安全上のご注意

で使用前に必ずお読み下さい。いずれも安全に関する重要な内容です、誤った取扱をすると ケガや事故など人や物に害を及ぼす内容が含まれております。

- ●美顔カートリッジではオートショットを使用しないで下さい。 ※目に対しての不意の照射や光漏れを防ぐため必ずお守りください。
- ●オートショット使用中は、本体表側の ON/OFF スイッチでは照射を止めることは出来ません 一時停止する場合はプローブを本体に置きレベル表示ランプが消灯したことを確認して下さい。 誤照射により目を害したりケガ、ヤケドの恐れがあります。
- ●センサーが肌に触れると照射をする機能です、他人に触れたり触れる可能性がある場所では 使用しないこと。また、自分の肌などへの接触で不意に照射しないよう十分に注意して下さい。 目を害したり、ケガ、ヤケドの恐れがあります。
- ●使用前にかならず取扱説明書を読み、通常使用をおこなって操作に慣れた後にオートショットを使用してください。
- ●同じ部分に連射するなど過度な照射はしないで下さい。ケガやヤケドの恐れがあります。

チャージ完了音、操作音のミュート(消音)機能の説明

チャージ完了音や電源や設定操作時の「ピー音」を消す機能です。 照射可能な状態をお知らせする音を消して使用したいときに設定して下さい。

- 1、プローブが本体に載った状態で、本体裏側の主電源スイッチが OFF になっている事を 確認します。
- 2、本体表面の電源スイッチを押したまま、本体裏側の主電源スイッチを ON にします。
- 3、「ピー音」が鳴らないで製品が起動します。
- 4、プローブを本体に戻したり、電源ボタンを押すとミュート機能は解除されます。

※オートショット使用時はチャージ完了音のミュート機能(消音)は使用できません。

製品仕様

■ 製品名 Intense Pulsed Light (IPL) ツーピーエス

■ 電源 AC100~240V 50/60Hz 200W

■ 波長 640nm~900nm

■ 光源タイプ スキンセンサー方式による皮膚密着照射

■ カートリッジ照射数 約132000 回 ※1

■ 照射ロサイズ 3.1×2.1cm■ 照射間隔 3秒~ ※2■ 冷却方法 ファンによる空冷

■ 保護用ゴーグル UV カット

■ 寸法 W196×D139×H180mm

■ 本体重量 1.1kg■ 製造国 韓国

※1 メーカー試験データ(レベル4)使用条件により照射数は増減いたします。使用レベルが低くなると照射可能回数は増えます、高くなると減ります。カートリッジは照射数が増えるとランプ、フィルターの汚れにより十分な性能を発揮できなくなります。その場

の性能を発揮出来ないだけでなく発熱や火災の原因になりますので、絶対に行わないで下さい。

- 合はお早めの交換をおすすめします。 ※2 レベル1の場合 (1/10 秒台切り捨て) 使用レベルが高くなると照射間隔は長くなります。またタコ配線は製品
- ※ 仕様は品質向上のため変更する場合があります。

製品保証書

保証規定

- 1. 保証期間内に本取扱説明書などに従い正常な状態で使用していて故障した場合には、 本規定に基づき無償修理いたします。但し、消耗品、付属品、メンテナンス費用などは 除きます。(保証対象部分 本体)
- 2. 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - ①本保証書のご提示がない時
 - ②本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名のない場合 または、文字を書き換えられたもの
 - ③お買い上げ後の転送、移動、落下などによる故障及び損傷
 - ④火災、地震、水害、落雷、公害、異常電圧、その他天変地異による故障及び損傷
 - ⑤使用上の誤り、事故、乱用及び不当な修理や改造による故障
 - ⑥注意事項を遵守しなかった原因による故障
 - ⑦お客様の不注意による損傷や故障
 - ⑧販売元指定の正規販売店以外で購入された場合
 - 9他の機器に起因する故障
 - ⑩業務用としての使用
- 3. 修理のご依頼はお買い上げ販売店または当社へ本保証書を添えてご依頼ください。 保証修理以外にかかる費用(梱包・送料など)は、お客様負担となります。
- 4. 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

贈答品や転居などで本書(販売証明)に記載されている販売店に修理を依頼出来ない場合はティ・ユー・エフお客様サポートセンターにご相談下さい。 この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。 したがって本書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	ツーピーエス (2PS)
保証期間	本体 ご購入日より1年 付属消耗品は対象外
ご購入日	年 月
	お名前
	ご住所
お客様	
	TEL
	店舗住所
販売店	
	TEL

販売元 株式会社ティ・ユー・エフ お客様サポートセンター

0120-80-1961

受付時間 10:00~11:30 13:00~17:00 (土日祝日 当社指定休業日を除く)